

## Lilaset - Kadınlar İçin İdrar Drenaj Seti

### Kullanım Talimatları:

Lilaset ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lilaset, kendiniz için ya da idrar ihtiyacınızı size yardımcı olacak olan yakınılarınız için kolaylık sağlayacaktır. Lilaset ürünü, kadınlar için idrar drenaj seti olarak tasarlanmış olup, hem yatan kadınlar için hem de ihtiyacınızı o an karşılayabilecek tuvalet bulamayan kadınlar için büyük rahatlık sağlamamaktadır.

Özel tasarımına sayesinde her alanda kullanımına olanak sağlayan Lilaset ile, kadınlar için zaman zaman büyük sorun haline gelen tuvalet problemini artık ortadan kalkacaktr.

### İçerik:

1. Lilaset Tanımı
2. Lilaset Parçaları
3. Lilaset Montajı
4. Lilaset Kullanımı
5. Lilaset Temizliği ve Saklanması
6. Lilaset Uyarılar ve Yararlı Bilgiler

### 1. Lilaset Tanımı

Lilaset, kadınların tuvalet ihtiyaçlarını düşündürerek tasarlanmıştır. Bu set, drenaj aparatı ve idrar torbası olarak iki parçadan oluşmaktadır. Lilaset, evde, seyahatte, araç içerisinde, kampta, hijyen açısından uygun olmayan tuvaletler vb. yerlerde, yatar durumda, otururken veya ayakta, tuvalet ihtiyaçlarınızın kolaylıkla çözülmeye olanak sağlar. Vücuda temas eden alanlar konfor sağlayan TPE malzemeden yapılmıştır.

### 2. Lilaset Parçaları

#### Görsel 1

### 3. Lilaset Montajı

#### Görsel 2

[www.lilaset.com](http://www.lilaset.com) sitesi üzerinden animasyonlu montaj videosunu görüntüleyebilirsiniz. İsterseniz kütü üzerinde yer alan QR kodu tarararak da Lilaset hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

### 4. Lilaset Kullanımı

#### Görsel 3

- Araç içinde oturma konumunda kullanılabilir. Kullanım pozisyonu ile ilgili görsel Görsel 4
- Tekerlekli sandalyede veya oturdugunuz koltuktan kalkamayan kadınlar tarafından kullanılabilir. Kullanım pozisyonu ile ilgili görsel Görsel 5
- İstenildiğinde ayakta kullanıma uygundur.

Açık havada tuvaletin olmadığı alanlarda veya mevcut tuvaletin hijyen açısından sakincalı olabileceği durumlarda bu şekilde kullanılabilir. Kullanım pozisyonu ile ilgili görsel Görsel 6

Önemli Hatırlatma: Ayakta kullanım hariç bütün kullanımılarda oturulan ya da yatılan yerde, Aparatin altına mutlaka kağıt peçete, kağıt havlu ya da benzer bir malzeme kojarak damlama olasılığına karşı önlemlenmelidir.

### 5. Lilaset Temizliği ve Saklanması

İdrar drenaj aparatını, her kullanıldan sonra sabun veya deterjan kullanarak bol su ile yıkayarak tekrar kullanabilirsiniz. Ürün yıkandıktan sonra mutlaka kurutulmalı ve hijyenik bir ortamda saklanmalıdır. Bu ürün kişiye özgüdür. Aynı ürünün başka bir kişi tarafından kullanılması uygun değildir.

### 6. Lilaset Uyarılar ve Yararlı Bilgiler

- Lilaset kadınların tek başına kullanabileceği bir üründür. Eğer tek başına kullanamıyorsanız, size yakınlarınızda yardımcı olabilir. Kullanım sırasında yatarak veya oturarak idrarını yapmak zorunda olan kadın bilinci açık olmalıdır.
- İdrar torbası tek kullanımlık. Torbanın altındaki musluk dikkatlice çekilekler idrar tahlisiyesi yapılabilir.
- İdrar torbası, ters tutulduğunda içindeki sıvı geriye kaçacak şekilde yapıldığından, ters çevirmeyiniz.
- İstenildiği takdirde Lilaset aparatını diğer idrar torbaları ile de kullanabilirsiniz. Lilaset ile birlikte gelen hortumu torbaya yakın bir noktadan keserek diğer idrar torbalarının konnektörlerini hortumun kestiğiniz ucuna bağlayabilirsiniz.
- Yatarak kullanımda tahlile hortumunu ezmeyiniz ve dizinin altında kalacak olmasına dikkat ediniz. Tahlile hortumu ve idrar torbası her zaman aparatın hizasının altında olmalıdır.
- Her kullanım sonrasında genital bölgede kalan idrarın oluşturabileceği kirilliği önlemek için genital bölge altının, kağıt havlu yada benzer malzeme ile korunmasına dikkat ediniz. Böylece aparatı bölgeden uzaklaştırılmış olabilecek damlamlalara karşı önlem alınmış olur.

- Aşırı obezite durumları ve/veya kız çocukları için liselat ürünüümüz anatomik nedenlerden dolayı düzgün çalışmaz.
- Ürün kuru ve serin verde, güneş almamak üzere şekilde oda sıcaklığında saklanmalıdır.
- Ürün üzerinde baskı oluşturacak, şeklini değiştirecek ağırlık olmamasına özen

gösterilmelidir.

- Ürün ömrü, ilk kullanım gerçekleştikten sonra, kullanma sıklığı, saklama koşullarına göre değişebilir. Saklama koşullarına uyulduğu sürece tavsiye edilen kullanım ömrü 2 yıldır. Ürünün sürekliliği ve her gün kullanılması durumunda 3 ayda bir ürünün yenisiyle değiştirilmesi önerilmektedir.
- Tedavi amaçlı olarak üretilmemiştir.

Raf ömrü : 5 yıl

Üretim tarihi :

Son kullanma tarihi:

**Yüklenici Firma:** Medhibit Medikal Sağlık Bilişim Limited Şirketi

**Adres:** Acıbadem Mh. Çeçen Sk. Akasya Evleri Sit. No:25 A Blok D:150 Üsküdar İstanbul Türkiye

**Website:** [www.lilaset.com](http://www.lilaset.com)

**Telefon:** +90 850 850 7570

**E-posta:** [info@lilaset.com](mailto:info@lilaset.com)



### Lilaset – Urine Drainage Set for Women

#### Instructions for Use:

Thank you for purchasing this product. Lilaset will make things easier for you or those who help you out with your urination needs. Designed as a urination drainage set for women, it is a great convenience for both bedbound women or women who need to urinate but cannot find a toilet at a particular time. Specifically designed so that it can be used under any circumstances, Lilaset will make the occasional toilet challenge for women a thing of the past.

#### Contents:

1. Lilaset Presentation
2. Lilaset Parts
3. Lilaset Assembly
4. Lilaset Use
5. Lilaset Cleaning and Storage
6. Lilaset Warnings and Useful Information

### 1. Lilaset Presentation

Lilaset was designed with women's toilet needs in mind. The set consists of two parts, the drainage appliance and the urination bag. Lilaset introduces an easy solution to your toilet needs at home, on the move, inside a vehicle, while camping and in places which are not hygienically safe, regardless whether you are lying, sitting, or standing. Lilaset is constructed of skin-friendly TPE material.

### 2. Lilaset Parts

#### Picture 1

### 3. Lilaset Assemblı

#### Picture 2

You can watch the animated Lilaset assembly video at [www.lilaset.com](http://www.lilaset.com). You can also access more information about Lilaset by scanning the QR code on the box.

### 4. Lilaset Use

#### Picture 3

- The product can be used in sitting position inside a vehicle. Illustrated Picture 4 is the vehicle sitting position for Lilaset use.
  - It can be used by women in a wheelchair or women unable to get up from their seats. Illustrated Picture 5 are the two Lilaset chair sitting positions.
  - Lilaset can be used in a standing position in open air places where there are no toilets or when the available toilets are not hygienic. Illustrated Picture 6 are the relevant standing and lying positions.
- Important Reminder: Except when you are using Lilaset in the standing position, make sure you take precautions against dripping by placing a paper towel etc. under the appliance in all sitting or lying positions.

### 5. Lilaset Cleaning and Storage

The urine drainage appliance is suitable for repeated use on condition it is washed with plenty of water and soap or detergent after each application.

After being washed, the product must definitely be dried and kept in a hygienic environment.

This product is for personal use only. It is not intended for multiple users.

### 6. Lilaset Warnings and Useful Information

- Lilaset can be used by women on their own. If you cannot use the product by yourself, people close to you can help you use it. Women who need to urinate while sitting or lying must be awake and conscious while using the product.
- The urine bag is for single use only. The urine can be drained by carefully pulling the valve under the bag.
- Do not turn the urine bag upside down because the liquid inside would flow back.
- If desired, you can use the Lilaset apparatus with other urine bags. You can cut the hose that comes with lilaset from a point close to the bag and connect the connectors of other urine bags to the end of the hose.
- Do not subject the drainage hose to pressure in lying position and make sure it is located below your knee. The drainage hose

and the urine bag should be below the level of the appliance at all times.

- Take care to ensure that a paper towel or similar material is placed under the genital area to prevent contamination by residual urine after each use. In this way, precautions will be taken against possible dripping while removing the appliance from the genital area.

- Lilaset may not function sufficiently for anatomical reasons in cases where it is used by young girls and/or excessively obese women.

- The product should be kept in a cool and dry place in room temperature without exposure to the sun.

- Care should be taken to ensure that undue pressure on the product that would change its shape is not applied.

- The life of the product can vary depending on frequency of use and storage conditions after first use. The recommended life of the product is two years subject to compliance with the storage conditions. It is suggested that the product be replaced with a new one every three months if it is used continuously or every day.

- The product is not intended for treatment purposes.

**Shelf life:** Five years

**Date of production:**

**Date of expiry:**

**Contracting Company:** Medhibit Medikal Sağlık Bilişim Limited Şirketi

**Address:** Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak Akasya Evleri Sitesi No:25 A Blok D:150 Üsküdar İstanbul Turkey

**Website:** [www.lilaset.com](http://www.lilaset.com)

**Telephone:**

+90 850 850 7570

**Email:** [info@lilaset.com](mailto:info@lilaset.com)

مشكلة المرحاض ، التي أصبحت مشكلة كبيرة للنساء من وقت آخر

#### المحتوى:

1. تقديم ليلاسيت
2. أجزاء ليلاسيت
3. تركيب ليلاسيت
4. استخدام ليلاسيت
5. ليلاسيت للتنظيف والتخزين
6. تبيهات ومعلومات مفيدة

تم تصميم Lilaset مع مراعاة احتياجات المرحاض النسائية.

ت تكون مجموعة المنتج من جزأين جهاز تصريف و مثابة.

يمكن استخدام Lilaset في المنزل، السفر ، في السيارة ، المخيم ، في أماكن عدم توفر المرحاض الصحي وهلم جرا. أثناء الاسترخاء أو الجلوس أو الوقوف ، تسخن لك Lilaset بسهولة ثانية احتياجاً لك المرحاض.

تصنع اجزاء المنتج الملائمة للجسم من مادة الطاط

Elastomer)

2. أجزاء ليلاسيت

الصورة 1

3. ليلاسيت تجميع الصورة 2

التجاري المتحرك على Lilaset يمكنك مشاهدة فيديو www.lilaset.com. يمكنك أيضًا الوصول إلى مزيد من المعلومات حول عن طريق مسح رمز الاستجابة على كروبي منتظر أو النساء غير

السريعة في المربى.

4. Lilaset الصورة 3

يمكن استخدام المنتج في وضع الجلوس داخل السيارة . الصورة 4 هي موضع جلوس السارة لاستخدام Lilaset.

يمكن استخدامها من قبل النساء على كروبي منتظر أو النساء غير

القادرات على التهوض من مقاعدهن. الصورة التوضيحية 5 هي صبي Lilaset.

وفي وضع الوقوف أو عندما تكون المرحاض المتاحة غير صحيحة . الصورة

6 هي موقع الوقوف والكتاب ذات الصلة. ذكرنا مهم: واستثناء عند استخدام Lilaset في وضع القيء ، أكد ذلك من اتخاذ الاحتياطات الازمة ضد نازف بوضو منشفة ورقية وما إلى ذلك حتى الجهاز في جميع أوضاع الجلوس أو الكتب.

5. Lilaset والنظافة والتغذية

يمكن استخدام المنتج في الأماكن المفتوحة حيث يتعذر الوصول إلى المرحاض في المرة . الصورة

لا يوجد مرافق أو عندما تكون المرحاض المتاحة غير صحيحة . الصورة

هذا المنتج شخصي ، نفس المنتج غير مناسب لاستخدام من قبل شخص آخر.

لilaset عن 6. تبيهات ومعلومات مفيدة

هو منتج يمكن للمرأة استخدامه بغير مفردها ، إذا لم تتمكن من استخدامه بمفردها ، فيمكن طلب المساعدة من الآباء ، المرأة التي

يعتنى بها التبول أثناء النوم أو الجلوس يجب أن تكون واحدة



### (Lilaset) مجموعة تصريف البول للنساء ليلاسيت

#### :تعليمات الاستخدام

شكرا لكم لشراء منتج Lilaset

سوف يقوم المنتج بتوفير الراحة لك أو لأقاربك الذين سوف يساعدونه في اختيارهم للتبول

تم تصميم المنتج ليكون بمثابة مجموعة تصريف البول للنساء وتوفر راحة كبيرة لكل من المرضى الداخليين

القديمين في المستشفيات والنساء اللواتي لا يستطعن

التأثير على مرضاهم يمكن تجنبه تجنبًا احتياجهن في تلك اللحظة.

بفضل تصميمه الخاص والذي يمكن استخدامه في جميع المجالات ، ستحتفظ

للاستخدام الفردي فقط. يمكن صرف البول عن طريق سحب الصنبر  
الذي اسلح الكيس بعناية.

لا تقم بتحريك المثانة رأساً على عقب لأنها مصنوعة بحيث يمكن ان  
يتحرك السائل الموجود في المثانة للخلف  
إذا أبغضت في ذلك، يمكنك استخدام الجهاز مع أكياس البول الأخرى.  
يمكنك نفس المطروم الذي ياتي في صندوق من نقطة قرية من الحقيقة  
ووصول موصلات أكياس البول الأخرى في نهاية المطروم  
عند الاستفقاء، لا تستحق خرطوم التصريف والمثانة دائمًا دون مستوى  
الركبة. يجب أن يكون خرطوم التصريف والمثانة دائمًا دون مستوى  
الماء.

بعد كل استخدام ، تأكد من حماية الجزء السفلي من المنطقة التناسلية  
بمنشفة ورقية أو مادة مماثلة لمنع ثروت البول المتبقى في المنطقة  
التناسلية . وبالتالي ، هكذا يتم اتخاذ الاحتياطات ضد أي سيلان للبول  
عند إزالة الجهاز من المنطقة

لسنة للفحص / أو الفحصات الصغيرات ، قد لا يعمل منتج أرجواني  
لدينا بشكل صحيح لأنابيب تشريجية  
يجب تخزين المنتج في مكان جاف وبارد في درجة حرارة الغرفة  
تأكد من عدم وجود ثقل فوق المنتج من شأنه أن يخلق ضغطاً أو يغير  
شكله.

قد يتخلص عمر المنتج وفقاً لظروف التخزين ومتى الاستخدام بعد  
الاستخدام الأول. مدة الخدمة الملوثة بها هي ستة شهور ماء استيفاء  
شروط التخزين. إذا تم استخدام المنتج بشكل مستمر وكل يوم ، فمن  
المستحسن استبدال المنتج كل 3 أشهر  
هذا المنتج غير مخصص للأغراض العلاجية.

مدة الصلاحية: 5 سنوات

تاريخ الإنتاج :

تاريخ انتهاء الصلاحية:

شركة المقاول:

Medhibit Medikal Sağlık Bilişim Limited  
Şirketi

العنوان:

تركيا ، اسطنبول ، اسكندر ، حي: أحبياديم ، شارع: شينير ، مترال  
أكاسيا ، رقم البناء: 25 ، رقم الشقة: 150

الموقع:

[www.lilaset.com](http://www.lilaset.com)

هاتف:

+90 850 850 7570


البريد الإلكتروني:

[info@lilaset.com](mailto:info@lilaset.com)


Görsel 1 - Picture 1 - الصورة 1



Görsel 2 - Picture 2 - الصورة 2

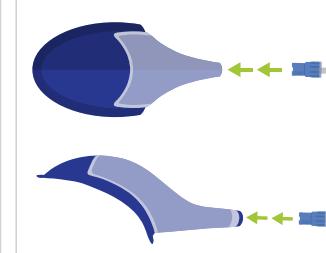


Görsel 4 - Picture 4 - الصورة 4

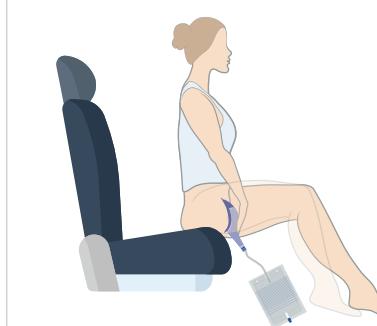

Görsel 6 - Picture 6 - الصورة 6



Görsel 3 - Picture 3 - الصورة 3

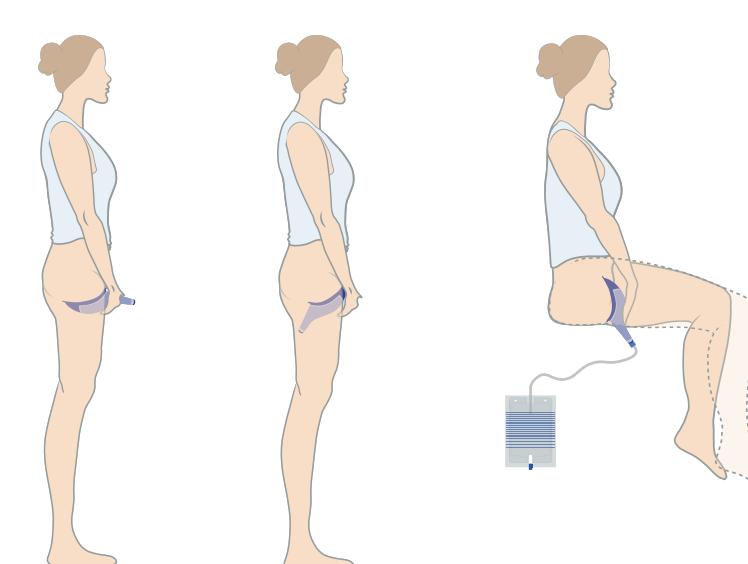

Görsel 5 - Picture 5 - الصورة 5

